


**Assembly Instruction**

Document No. <b>228678</b>	Revision <b>E</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2007-04-25</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>11/18/2013</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>1</b>	

## Amputation support

### List of parts that should be in the set

**Always included:**

- 1 pc Bracket.
- 2 pcs Nuts, M6, for mounting cushion.
- 2 pcs Screws, M6x14, for mounting cushion.
- 2 pcs Washers, 6mm, for mounting cushion.

**Depending on model, the following will be included:**

- 1 pc Cushion, A.
- 1 pc Cover for cushion A.
- 1 pc Cushion, D.
- 1 pc Cover for cushion D.
- 1 pc Cushion, H.
- 1 pc Cover for cushion H.
- 1 pc Cushion, J.
- 1 pc Cover for cushion J.

### Read the instructions carefully *before* starting installation



*Fig. 1. Cushion A. The set with order number 103061-99-0 contains cushion and bracket, Fig. 6. Order number 103067-99-0 also contains a cushion cover.*




*Fig. 2. Cushion D. The set with order number 103066-99-0 contains cushion and bracket, Fig. 6. Order number 103071-99-0 also contains a cushion cover.*



*Fig. 3. Cushion H. The set with order number 103065-99-0 contains cushion and bracket, Fig. 6. Order number 103070-99-0 also contains a cushion cover.*

**Assembly Instruction**

Document No. <b>228678</b>	Revision <b>E</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2007-04-25</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>11/18/2013</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>2</b>	




*Fig. 4. Cushion J. The set with order number 103064-99-0 contains cushion and bracket, Fig. 6. Order number 103068-99-0 also contains a cushion cover.*

**Assembly of cushion and amputation support bracket**


The assembly method is the same regardless of the cushion alternative selected.

The cushion can be identified by the letter of the alphabet moulded into it. Figure 5.

The amputation support bracket is universal and used on all combinations. Figure 6.

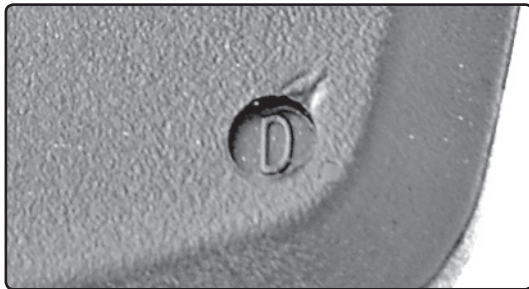


*Fig. 5. The moulded identification letter.*

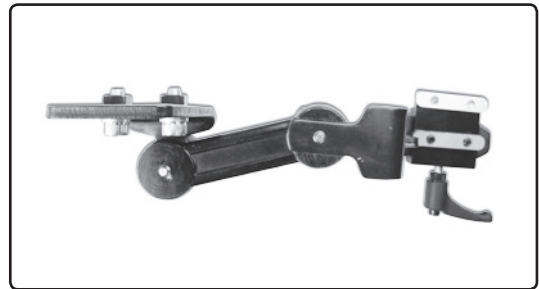

*Fig. 6. Bracket for amputation support.*


Mount the two screws on the bracket for accessory attachment. Place a washer between the screw head and the bracket. Screw on the nuts with only a few turns. See figure 6.

Insert the nuts in the two grooves on the rear of the cushion. See figure 7. Slide the bracket in towards the centre of the cushion. Then turn the cushion 90°. Slide the cushion to a position which suits the user. Tighten the fixing screws.

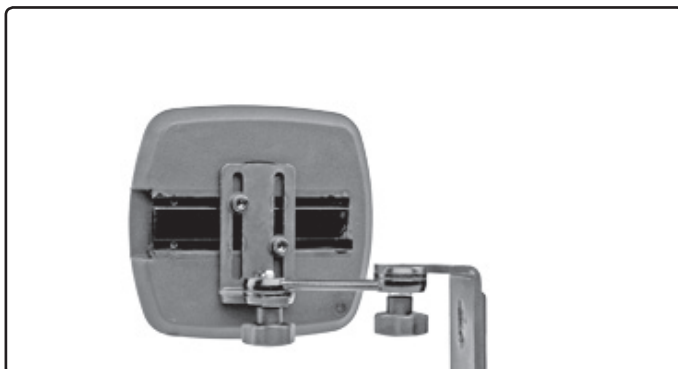

*Fig. 7. Assembly of cushion and bracket. Left, the bracket nuts are slid into the cushion grooves. Right, the cushion is turned to the desired position.*

**Assembly Instruction**

Document No. <b>228678</b>	Revision <b>E</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2007-04-25</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>11/18/2013</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>3</b>	

**Attachment of accessory**

Remove the plastic plug from the front edge of the accessory rail, see Fig. 9. Undo the screws on the bracket holder, Fig. 8, so that the metal lip slides easily in the upper groove of the accessory rail. The holder should only be mounted on the top part of the rail, Fig. 9. Replace the plastic plug. Slide the holder forwards towards the plastic plug. Tighten the holder screws.

Undo the screw lever on the bracket holder. Slide the amputation support into position. Tighten the lever. Figure 10.



*Fig. 8. Bracket holder for mounting on the seat's accessory rail.*



*Fig. 9. The bracket holder mounted on the accessory rail.*

**Adjustment of accessory**

**The amputation support is adjusted with the two articulated joints and by moving the cushion both for depth and from side to side.**


The vertical position is adjusted with the two articulated joints. Depth and sideways adjustments are done with the screws holding the cushion. See figure 7.

Loosen the knobs on both the articulated joints and set to the desired position. Fix the position by tightening the knobs. Loosen the screws holding the cushion and adjust to the desired depth and sideways position. Fix the position by tightening the screws again. Figure 10.



*Fig. 10. Adjusting the amputation support to the user's requirements.*

**Assembly Instruction**

Document No. <b>228678</b>	Revision <b>E</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2007-04-25</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>11/18/2013</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>4</b>	

## Amputationsstöd

### Förteckning över de detaljer som skall finnas i satsen

**Medföljer alltid:**

- 1st. Fäste.
- 2st. Muttrar, M6, för montage av kudde.
- 2st. Skruvar, M6x14, för montage av kudde.
- 2st. Brickor, 6mm, för montage av kudde.

**Beroende av vilket utförande som valts ingår:**

- 1st. Kudde, A.
- 1st. Klädsel till kudde A.
- 1st. Kudde, D.
- 1st. Klädsel till kudde D.
- 1st. Kudde, H.
- 1st. Klädsel till kudde H.
- 1st. Kudde, J.
- 1st. Klädsel till kudde J.

### Läs noga igenom anvisningen *innan* montering påbörjas



*Bild 1. Kudde A. Satsen med beställningsnummer 103061-99-0 innehåller kudde och fäste, bild 6. Beställningsnummer 103067-99-0 innehåller även klädsel/överdrag.*




*Bild 2. Kudde D. Satsen med beställningsnummer 103066-99-0 innehåller kudde och fäste, bild 6. Beställningsnummer 103071-99-0 innehåller även klädsel/överdrag.*



*Bild 3. Kudde H. Satsen med beställningsnummer 103065-99-0 innehåller kudde och fäste, bild 6. Beställningsnummer 103070-99-0 innehåller även klädsel/överdrag.*

**Assembly Instruction**

Document No. <b>228678</b>	Revision <b>E</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2007-04-25</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>11/18/2013</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>5</b>	




*Bild 4. Kudde J. Satsen med beställningsnummer 103064-99-0 innehåller kudde och fäste, bild 6. Beställningsnummer 103068-99-0 innehåller även klädsel/överdrag.*

**Hopmontering av kudde och amputationsstödfäste**


Tillvägagångssättet vid monteringen är det samma oberoende av vilket kuddalternativ som valts.

Kudden identifieras med hjälp av den bokstav som finns ingjuten på den. Bild 5.

Fästet till amputationsstödet är universiellt och används till alla kombinationerna. Bild 6.

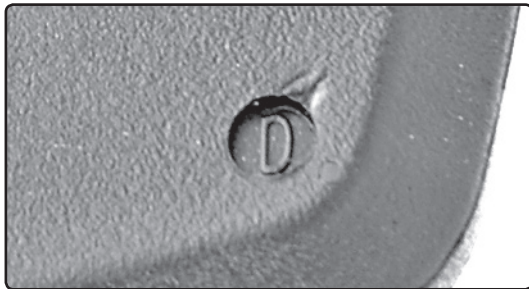

*Bild 5. Den ingjutna bokstaven för identifiering.*

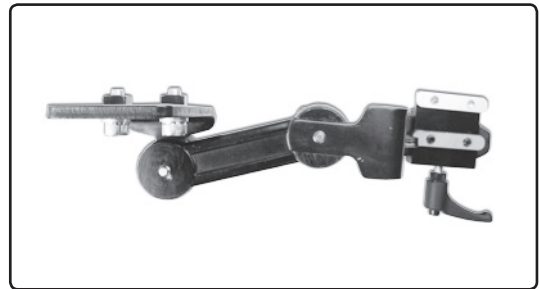


*Bild 6. Fäste till amputationsstödet.*

Montera fästets två skruvar för tillbehörsmontering. Placera brickan mellan skruvskalle och fäste.

Skruva dit muttrarna endast något gängvarv. Se bild 6.


Skjut in muttrarna i de två skårorna som finns bak på kudden. Se bild 7. Skjut in fästet mot mitten av kudden. Vrid därefter kudden 90°. Skjut kudden till ett läge som passar brukaren. Dra åt fästskruvarna.

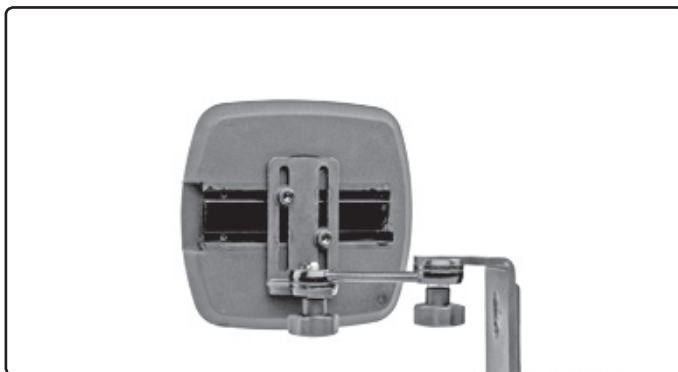

*Bild 7. Hopmontering av kudde och fäste. Till vänster, fästets muttrar skjuts in i kuddens skårar. Till höger, kudden vrids till önskat läge.*



**Assembly Instruction**

Document No. <b>228678</b>	Revision <b>E</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2007-04-25</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>11/18/2013</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>6</b>	

**Montering av tillbehöret**

Demontera plastpluggen i tillbehörsskenans framkant, se bild 9.

Öppna fästeshållarens skruvar så att metallklacken, bild 8, lätt glider in i tillbehörsskenans övre spår. Hållaren får bara monteras i skenans övre del, bild 9. Sätt in plastpluggen på sin plats igen. Skjut fram hållaren mot plastpluggen. Dra åt hållarens skruvar.

Öppna skruvvredet på fästeshållaren. Skjut in amputationsstödet på plats. Skruva åt vredet. Bild 10.



*Bild 8. Fästeshållare för montering på sitsens tillbehörsskena.*



*Bild 9. Fästeshållaren monterad i tillbehörsskenan.*

**Injustering av tillbehöret**

Amputationsstödet ställs in med hjälp av två leder och genom att kudden kan förskjutas både i djup- och sidled.

Den vertikala positionen ställs in med de två lederna. Djup- och sidjusteringar görs med skruvarna som håller kudden. Se bild 7.

Lossa vreden i de båda lederna, ställ in önskad position. Fixera läget genom att dra åt vreden. Lossa skruvarna som håller kudden på plats, justera in önskad djup- och sidposition. Fixera genom att dra åt skruvarna igen. Bild 10.



*Bild 10. Anpassning av amputationsstödet till brukarens behov.*