


Assembly Instruction

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|---|
| Document No. 246555 | Revision A.01 | | | |  |
| Production state | | | | | |
| Preform Date 2011-01-12 | Preform By UDN | Approved Date | Approved By | | Page 1 |

Mounting Co-Pilot for R-net

Item no.: **317694***Co-pilot R-net*

List of parts in the set.

1 pcs. handle
4 pcs. screws ISO 4762 M5x12 Fe/Zn

1 pcs. R-net cable 1.5m
5 pcs. cable ties

Mounting

Read the instructions carefully *before* starting installation.

1. Mount the handle on the bracket using 4 x M5x10 screws. See *Fig. 1*.
2. Fit one end of the cable to the panel and the other to the terminal strip for the seat/chassis. For detailed information about the location of the strip, see the seat/chassis manual.
3. Secure the cable along the bracket and seat using cable ties located at approximately 150 mm intervals. Leave plenty of spare cable at the join points so that the cable is not stretched and broken. Remember that it must be possible to adjust the handle lengthwise.



Fig. 1. Mounting the handle.

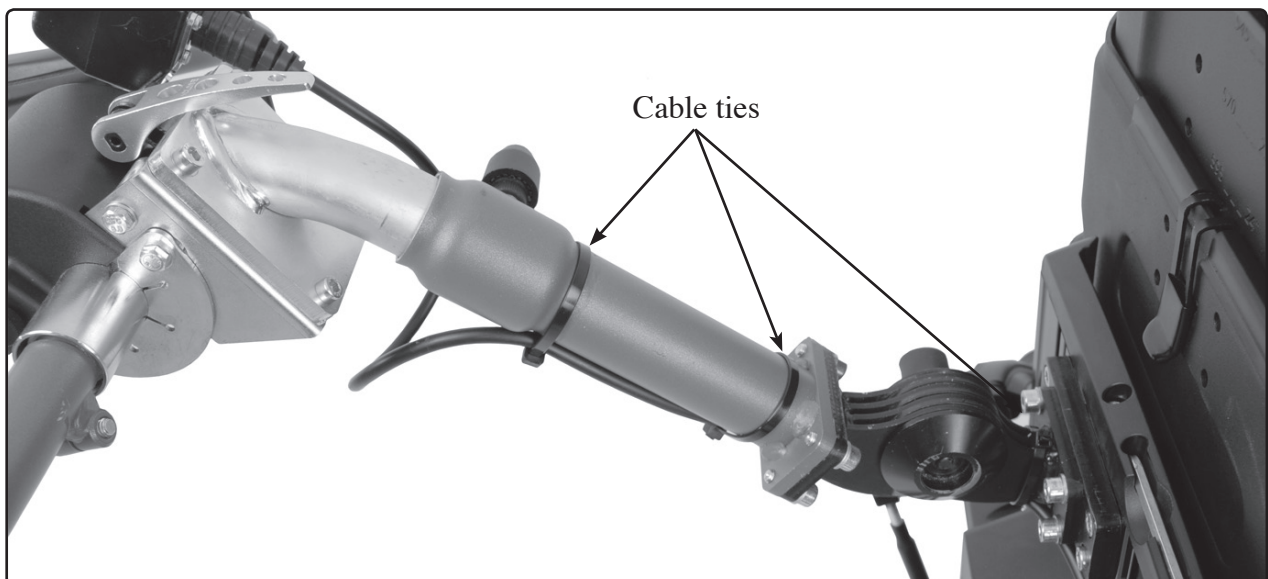



Fig. 2. Cabling secured with cable ties.

Assembly Instruction

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|---|
| Document No. 246555 | Revision A.01 | | | |  |
| Production state | | | | | |
| Preform Date 2011-01-12 | Preform By UDN | Approved Date | Approved By | Page 2 | |

NB! Check that all moving parts can move to their minimum and maximum position without stretching the cabling.

4. Check that all the covers are replaced. For detailed information, see the chair's service manual.
5. Load the Co-pilot program.
6. Test-run all the functions.



Fig. 3. Cabling secured with cable ties.

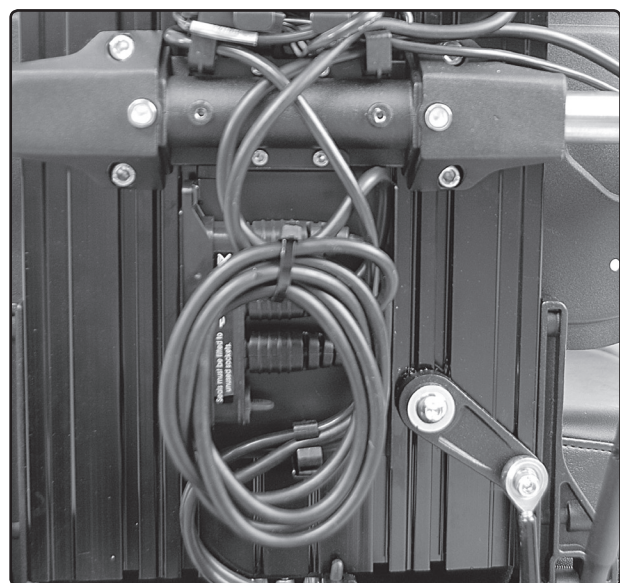



Fig. 4. Example of cable linked to chair's terminal strip.

Assembly Instruction

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|------|---|
| Document No. 246555 | Revision A.01 | | | |  |
| Production state | | | | | |
| Preform Date 2011-01-12 | Preform By UDN | Approved Date | Approved By | Page | 3 |

Montering av Co-Pilot för R-net

Item.nr: 317694*Co-pilot R-net*

Förteckning över detaljer som skall finnas i satsen.

1st Handtag

4st Skruv ISO 4762 M5x10 Fe/Zn

1st Kabel R-net 1,5m


5st Buntband

Montering


Läs igenom anvisningen *innan* montering påbörjas.

1. Montera handtaget på fästet med 4st skruv M5x10, se bild 1.
2. Montera kablagentets ena ände på panelen och den andra i kopplingsplinten på sitsen/chassit, för utförlig information om plintens placering se sitsens/chassits manual.
3. Fäst kablagentet längs fästet och sitsen med buntband placerade med ca 150mm mellanrum. Lämna väl tilltaget med lös kabel vid ledpunkter, så att inte kablagentet sträcks sönder, tänk på att handtaget ska gå att längdjustera.

OBS! Kontrollera att alla rörliga delar går att föra till sitt min och max läge utan att kablagen blir för sträckta.

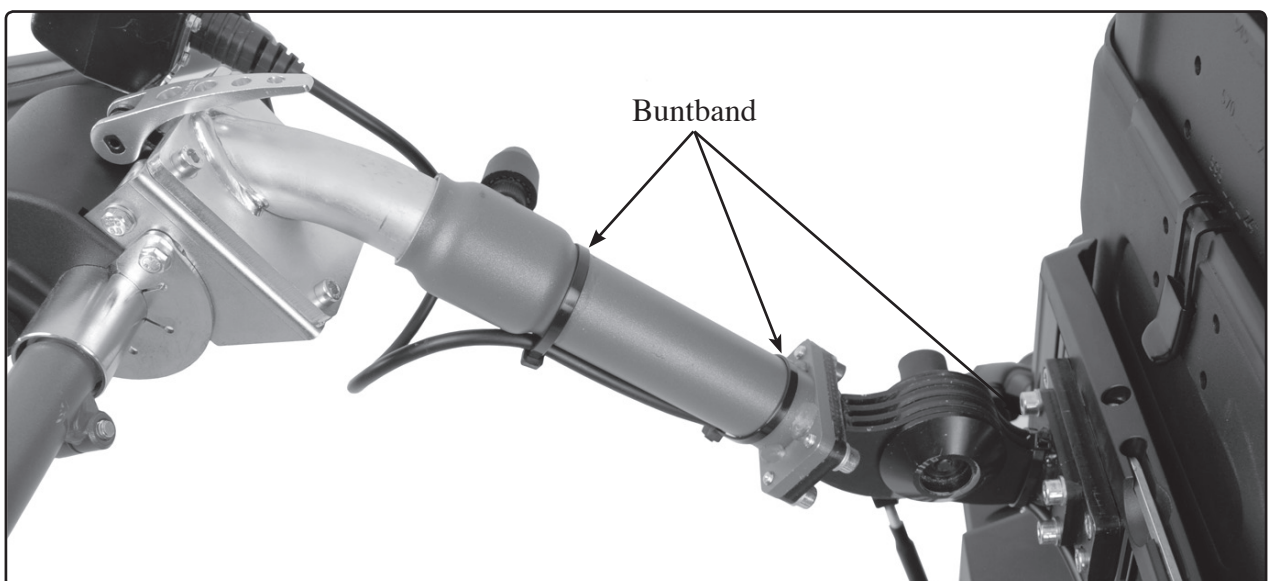*Bild 1. Handtagets montering**Bild 2. Kablagentet fäst med buntband.*

Assembly Instruction

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|---|
| Document No. 246555 | Revision A.01 | | | |  |
| Production state | | | | | |
| Preform Date 2011-01-12 | Preform By UDN | Approved Date | Approved By | Page 4 | |

4. Kontrollera att alla kåpor är återmonterade, för utförlig information se stolens servicemanual.
5. Ladda in program för Co-pilot.
6. Testkör alla funktioner.



Bild 3. Kablaget fäst med buntband.

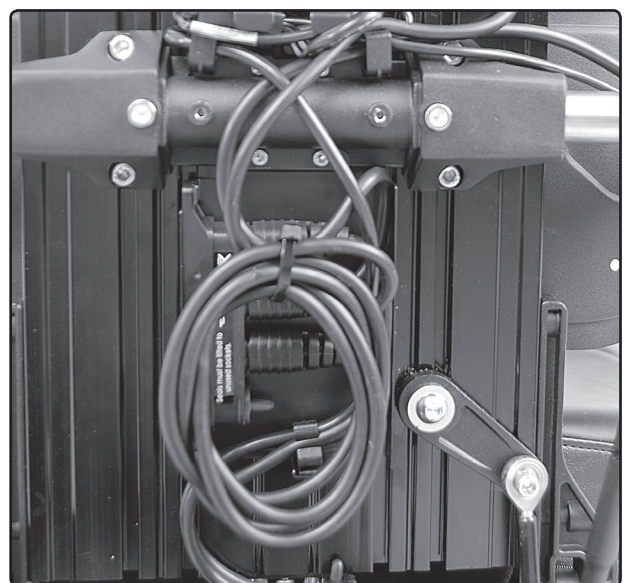


Bild 4. Ex på kablage inkopplad på stolens kopplingsplint