

Assembly Instruction

Document No. 269511	Revision B				permobil
Production state SERIES					
Preform Date 2015-06-17	Preform By JOF	Approved Date 2016-02-10	Approved By GHT	Page EN 1	

Installation instructions for armrest pad, Corpus

Removing the armrest pad, Corpus	<i>Page 1</i>
Installing the armrest pad, Corpus	<i>Page 2</i>
Cleaning the armrest pad, Corpus	<i>Page 3</i>

Contents

1 set Armrest pad




Tools (not included):

- 4 mm ball-end hex key or similar

Removing the armrest pad, Corpus

1. Raise the armrest for easier access to the anchor points.
2. Remove the existing armrest pad by pressing in the anchor points with the aid of a tool (e.g. hex key or screwdriver). Once they are all pressed in, carefully remove the pad.

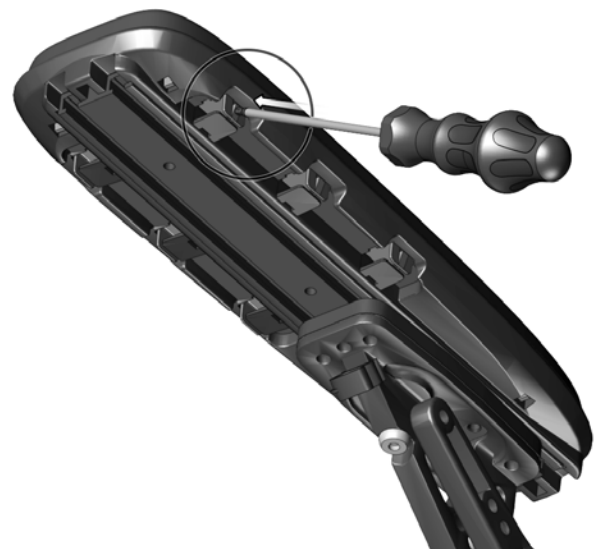


Assembly Instruction

Document No. 269511	Revision B				permobil
Production state SERIES					
Preform Date 2015-06-17	Preform By JOF	Approved Date 2016-02-10	Approved By GHT	Page EN 2	

Installing the armrest pad, Corpus


1. Install the new armrest pad by moving it straight down and locating it so that all of its anchor points arrive in the correct positions (1).
Press the pad into place by hand (2).

NOTE: Be sure that all anchor points attach properly.

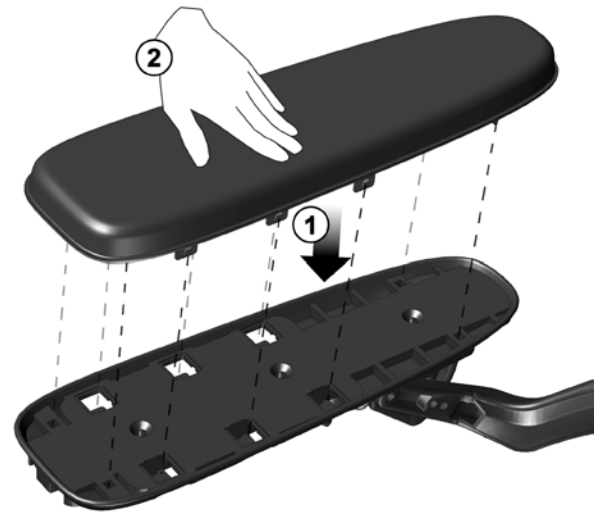

2. Use a 4 mm ball-end hex key (or similar narrow round tool) to press the excess fabric under the armrest trim.

NOTE: Do NOT use sharp instruments as these may damage the fabric.

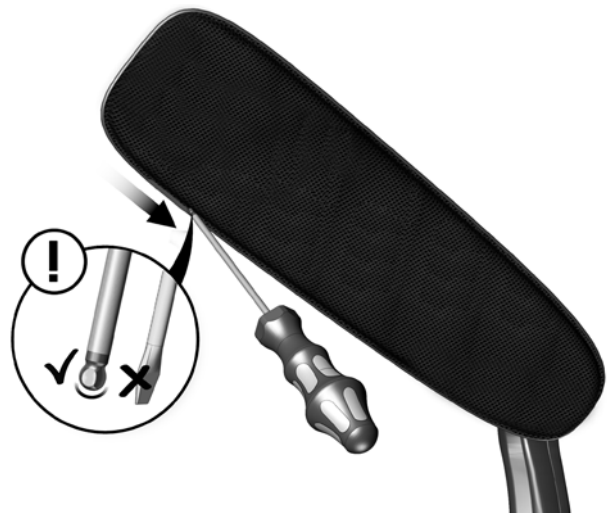


Assembly Instruction

Document No. 269511	Revision B				permobil
Production state SERIES					
Preform Date 2015-06-17	Preform By JOF	Approved Date 2016-02-10	Approved By GHT	Page EN 3	

Cleaning the armrest pad, Corpus

1. Clean the armrest pad with a cloth moistened with hot water.

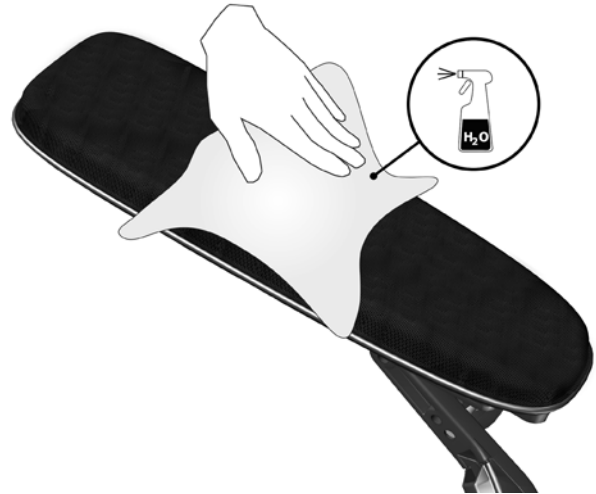

Assembly Instruction

Document No. 269511	Revision B				permobil
Production state SERIES					
Preform Date 2015-06-17	Preform By JOF	Approved Date 2016-02-10	Approved By GHT	Page SE 1	


Installationsanvisning för armstödsdyna, Corpus

Demontering av armstödsdyna, Corpus
 Montering av armstödsdyna, Corpus
 Rengöring av armstödsdyna, Corpus

Sida 1
Sida 2
Sida 3

Innehållsförteckning

1 st armstödsdyna

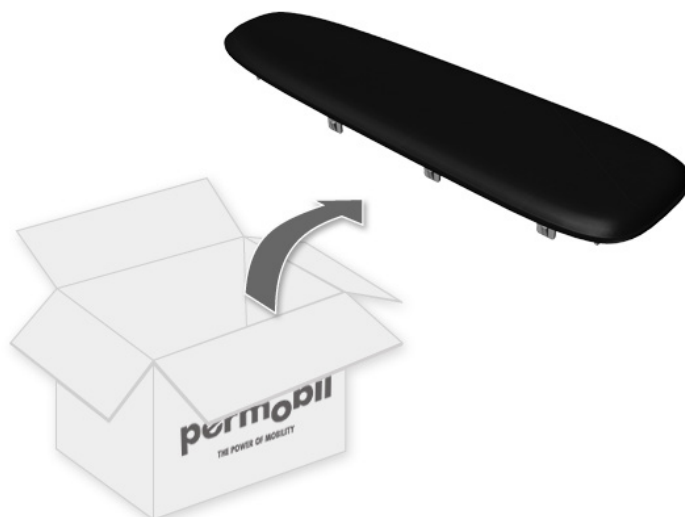


Verktyg (medföljer ej):

- 4 mm rundad insexnyckel el. liknande

Demontering av armstödsdyna, Corpus

1. Vinkla upp armstödet för lättare åtkomst av fästpunkterna.
2. Demontera armstödsdynan genom att trycka in fästpunkterna med hjälp av t ex en insexnyckel eller skruvmejsel. När alla fästpunkter är intryckta kan dynan försiktigt lyftas av.

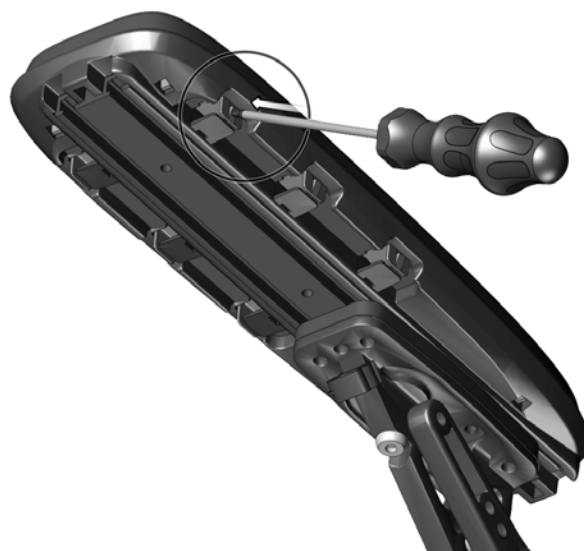


Assembly Instruction

Document No. 269511	Revision B				permobil
Production state SERIES					
Preform Date 2015-06-17	Preform By JOF	Approved Date 2016-02-10	Approved By GHT	Page SE 2	

Montering av armstödsdyna, Corpus


1. Montera den nya armstödsdynan genom att föra den rakt nedåt och placera den så att alla fästpunkter hamnar på rätt ställe (1). Använd handkraft för att trycka dynan på plats (2).

OBS: Var noga med att alla fästpunkter klickar i ordentligt.

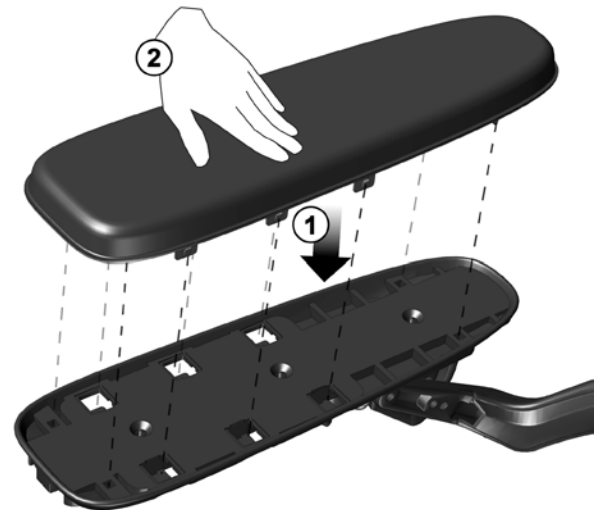

2. Använd ett smalt rundat verktyg (t ex en rundad insexnyckel 4 mm) för att trycka ner det överskjutande tyget in under plastkåpan på armstödet.

OBS: Använd INTE vassa föremål då dessa kan skada tyget.

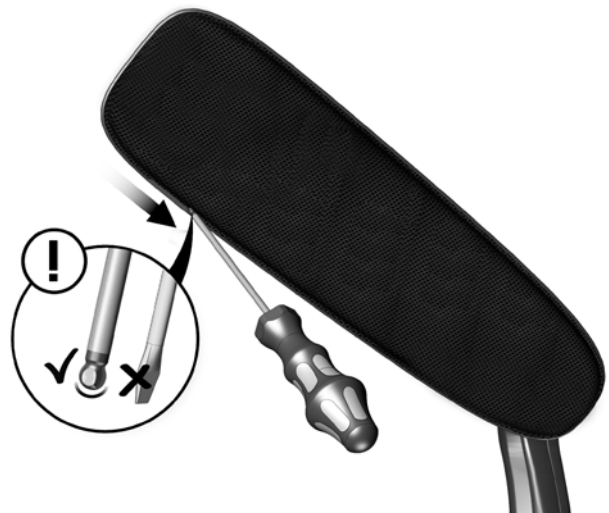

Assembly Instruction

Document No. 269511	Revision B				permobil
Production state SERIES					
Preform Date 2015-06-17	Preform By JOF	Approved Date 2016-02-10	Approved By GHT	Page SE 3	

Rengöring av armstödsdyna, Corpus

1. Rengör armstödsdynan med en lätt fuktad trasa med varmt vatten.

