


**Assembly Instruction**

Document No. <b>232778</b>	Revision <b>C</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date 2008-01-30	Preform By BTA	Approved Date 2011-03-01	Approved By GHT	Page 1	


**Table fixed***Order no.: 103426-99-0***List of parts in the set***Fig. 1. Parts included in the set.*

- 1 pc Table. Table top and frame.
- 1 pc. Inner square tube, UniTrack.
- 2 pcs. Square nuts.
- 2 pcs. Screws M6x12.
- 1 pc. Accessory bracket.
- 1 pc. Inner square tube, for older accessory brackets.

**Read the instructions carefully *before* starting installation****Attachment of accessory**

The table can be fixed on the left or right side. Undo the four screws securing the table top, fig. 3. Turn the table frame to suit the chosen alternative.

Remove the forward plastic plug from the accessory rail. Screw the two M6x12 screws and square nuts in the accessory bracket. Figure 2. Only screw the nuts onto the screws by a few turns. Slide the bracket with the nuts mounted into the grooves on the accessory rail. Fig. 4.

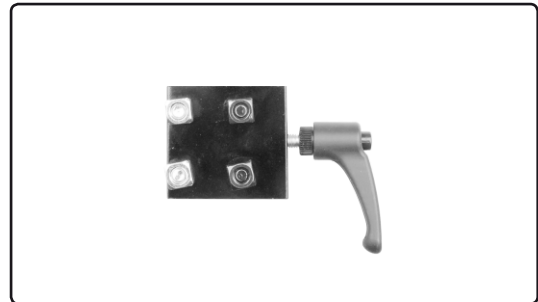

*Fig. 3. Screw the two M6x12 screws and square nuts in the accessory bracket. Only screw the nuts onto the screws by a few turns.*




*Fig. 3. Undo the four screws that hold the table top in place. Turn the table top for right or left assembly.*



*Figure 4. Remove the plastic plug from the rail. Slide the accessory bracket into the grooves on the accessory rail.*

**Assembly Instruction**

Document No. <b>232778</b>	Revision <b>C</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2008-01-30</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>2011-03-01</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>2</b>	


Refit the plastic plug. Slide the accessory rail forward towards the plastic plug. Tighten the bracket. Fig. 5. Unscrew the knob on the accessory bracket and mount the inner square tube for UniTrack in the bracket. The head of the stop screw must rest against the top edge of the accessory bracket. Tighten the accessory with the knob.

Screw out the two stop screws on the outer square tube of the frame. Mount the table on the inner square tube. Figure 6. Check that the table has been lowered so far that both stop screws engage with the inner square tube. Tighten the stop screws.

Remove the protective plastic from the table top.



*Fig. 5. The bracket mounted as far forward as the fully inserted plastic plug will allow.*

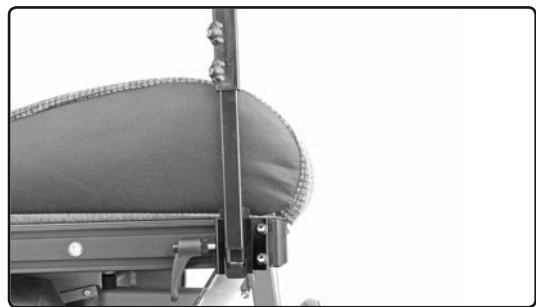


*Fig. 6. The table mounted on the accessory holder. Check that the top part of the table has been lowered so far that both fixing screws engage with the inner square tube.*

**Adjustment of accessory**

Adjust the distance between the user and the table by undoing the two stop screws fixing the table top in position along the central square profile. Figure 7. Tighten the stop screws once the desired position has been reached.

Adjust the table top sideways by releasing the table top from the frame, fig. 3. Move the central square profile to a suitable screw hole in the table top fixing. Figure 7. Tighten the screws and refit the table top. Tighten the four screws which hold the table top in position.

Adjust the table top angle by undoing the knob, fig. 8. Adjust to the desired position. Tighten the knob.

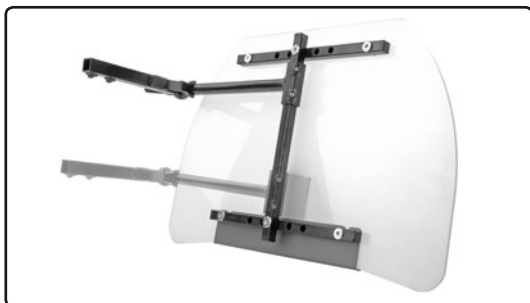


*Fig. 7. Underside of table. The distance of the table top to the user is adjusted with the two screws which hold the table top in position along the central square profile. The table top is adjusted sideways by moving the central square profile to one of the other screw holes in the table top fixing.*



*Fig. 8. The table top angle is adjusted with the frame knob.*

**Assembly Instruction**

Document No. <b>232778</b>	Revision <b>C</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2008-01-30</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>2011-03-01</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>3</b>	

**Bord fast***Best.nr: 103426-99-0***Förteckning över de detaljer som ingår i satsen***Bild 1. De detaljer som medföljer satsen.*

- 1 st Bord. Bordsskiva och stativ.
- 1 st Inre fyrkantrör, UniTrack.
- 2 st Fyrkantmuttrar.
- 2 st Skruvar M6x12.
- 1 st Tillbehörsfäste.
- 1 st Inre fyrkantrör, för äldre tillbehörsfästen.


**Läs noga igenom anvisningen innan montering påbörjas****Montering av tillbehöret**

Bordet kan monteras på vänster eller höger sida. Skruva loss de fyra skruvar som håller bordsskivan, bild 3. Vänd bordsstativet till valt alternativ.

Ta bort den främre plastpluggen från tillbehörs-skenan. Montera de två M6x12 skruvarna och fyrkantmuttrarna i tillbehörsfästet. Muttrarna skruvas in endast några varv på skruvarna. Bild 2. Skjut in fästet med muttrarna instuckna i tillbehörsskenans skåror. Bild 4.

*Bild 2. Montera de två M6x12 skruvarna och fyrkantmuttrarna i tillbehörsfästet. Muttrarna skruvas in endast några varv på skruvarna.**Bild 3. Lossa de fyra skruvarna som håller bordsskivan. Vänd bordsstativet för höger eller vänster montage.**Bild 4. Platspluggen demonteras från skenan. Tillbehörsfästet skjuts in i tillbehörsskenans skåror.*

**Assembly Instruction**

Document No. <b>232778</b>	Revision <b>C</b>				
Production state <b>SERIES</b>					
Preform Date <b>2008-01-30</b>	Preform By <b>BTA</b>	Approved Date <b>2011-03-01</b>	Approved By <b>GHT</b>	Page <b>4</b>	

Återmontera plastpluggen. Skjut tillbehörsfästet fram mot plastpluggen. Dra fast fästet. Bild 5.


Öppna tillbehörsfästets skruvvred och montera det inre fyrkantröret för UniTrack i fästet. Stoppskruvens huvud skall vila mot tillbehörsfästets övre kant. Dra fast tillbehöret med skruvvredet.

Öppna de två stoppskruvarna på stativets yttre fyrkantrör. Montera bordet på det inre fyrkantröret. Bild 6. Kontrollera att bordet är så långt nedsänkt att båda stoppskruvarna greppar tag i det inre fyrkantröret. Dra fast stoppskruvarna.

Avlägsna skyddsplasten från bordsskivan.



*Bild 5. Fästet monterat så långt fram som den helt inskjutna plastpluggen tillåter.*

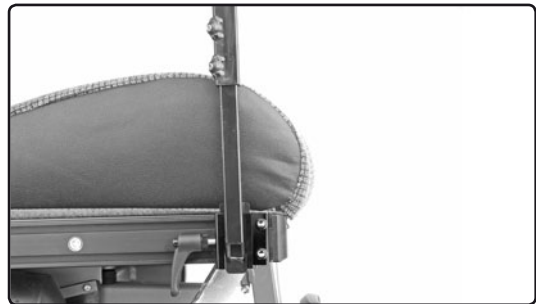


*Bild 6. Bordet monterat i tillbehörshållaren. Kontrollera att bordets överdel är så långt nedskjutet att båda fästskruvarna greppar mot det inre fyrkantröret.*

**Injustering av tillbehöret**

Avståndet mellan brukaren och bordet justeras genom att de två stoppskruvarna som fixerar bordsskivans läge utmed den mittre fyrkantprofilen lossas. Bild 7. Dra fast stoppskruvarna när önskat läge är inställt.

Bordsskivans position i sidled justeras genom att bordsskivan lossas från stativet, bild 3. Flytta den mittre fyrkantprofilen till lämpliga skruvhål i infästningarna mot bordsskivan. Bild 7. Dra åt skruvarna och återmontera bordsskivan. Dra åt de fyra skruvarna som fäster bordsskivan.

Bordsskivans vinkel justeras genom att skruvvredet, bild 8, lossas. Ställ in önskat läge. Dra åt skruvvredet.

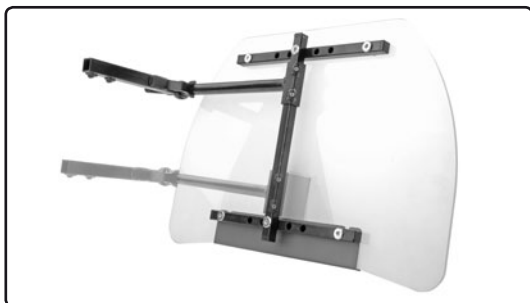

*Bild 7. Bordets undersida. Bordsskivans avstånd till brukaren justeras med hjälp av två skruvar som fixerar skivans läge utmed den mittre fyrkantprofilen.*

*Skivan justeras i sidled genom att flytta den mittre fyrkantprofilen till något av de andra skruvhålen i infästningen mot bordsskivan.*



*Bild 8. Bordsskivans vinkel justeras med stativets skruvvred.*