

Document No. 268488	Revision A				permobil
Production state FOR SERIES					
Preform Date 2015-04-10	Preform By ROHO	Approved Date 4/13/2015	Approved By GHT	Page US1	

Replacing safety grip to the attendant control

Description for how to replace the safety grip on the attendant control.

Remove the safety lever



Figure 1. Press your fingers underneath the safety grip and pull to get the rod loose from the holder in the rubber handle.



Figure 2 and 3. Choose either side, grab the safety grip and forcefully pull it back and then out from the handle to get it loose. The opposite end of the safety grip will now also be loose.

Document No. 268488	Revision A				permobil
Production state FOR SERIES					
Preform Date 2015-04-10	Preform By ROHO	Approved Date 4/13/2015	Approved By GHT	Page US2	

Install the new safety grip



Figure 4. With the ends in place, push back the safety grip in the holder.

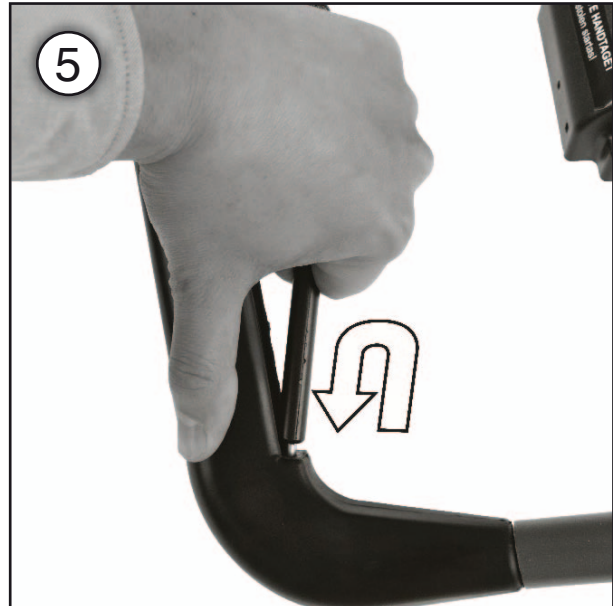


Figure 5. Put one of the ends into one of the cavities in the rubber handle.



Figure 6. The opposite end of the safety grip is aligned with force into the other cavity. Push it back and then forward to align it.

Document No. 268488	Revision A				permobil
Production state FOR SERIES					
Preform Date 2015-04-10	Preform By ROHO	Approved Date 4/13/2015	Approved By GHT	Page 3	

Byte av säkerhetsgrepp till vårdarstyrning

Beskrivningen gäller hur man byter ut säkerhetsgreppet på vårdarstyrningen.

Demontera säkerhetsgreppet



Bild 1. Pressa in fingrarna underifrån på säkerhetsgreppet och dra utåt för att få lös stangen från hållaren i mitten av gummihandtaget.

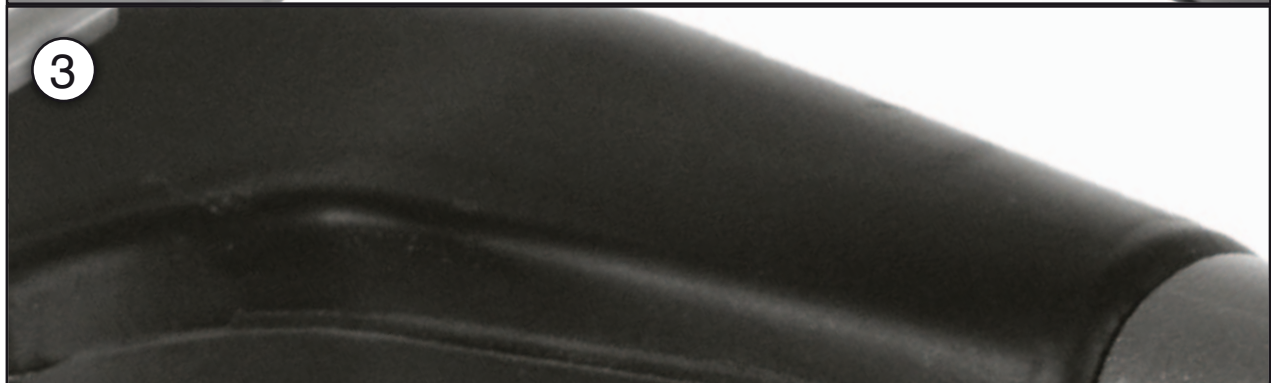


Bild 2 och 3. Välj valfri sida, greppa säkerhetsgreppet och med kraft dra den bakåt och sedan ut från handtaget för att få lös den. Motsatt ände av säkerhetsgreppet kommer nu att sitta löst.

Document No. 268488	Revision A				permobil
Production state FOR SERIES					
Preform Date 2015-04-10	Preform By ROHO	Approved Date 4/13/2015	Approved By GHT	Page 4	

Montera nytt säkerhetsgrepp

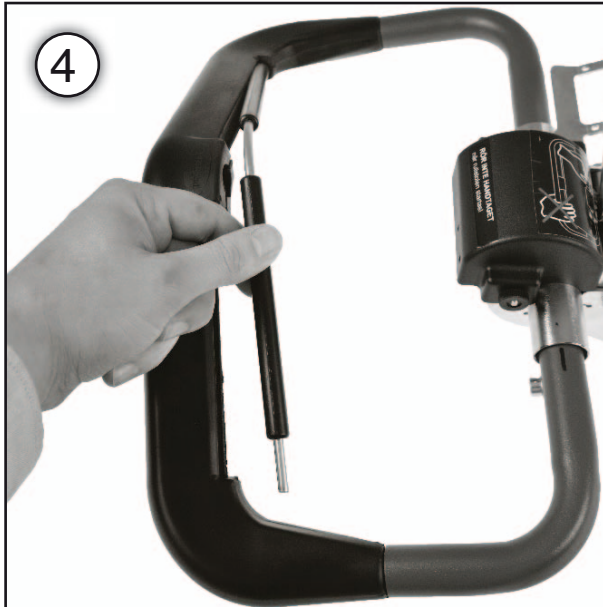


Bild 5. Rikta in en av säkerhetsgreppets ändar i gummihandtagets ena hållighet.

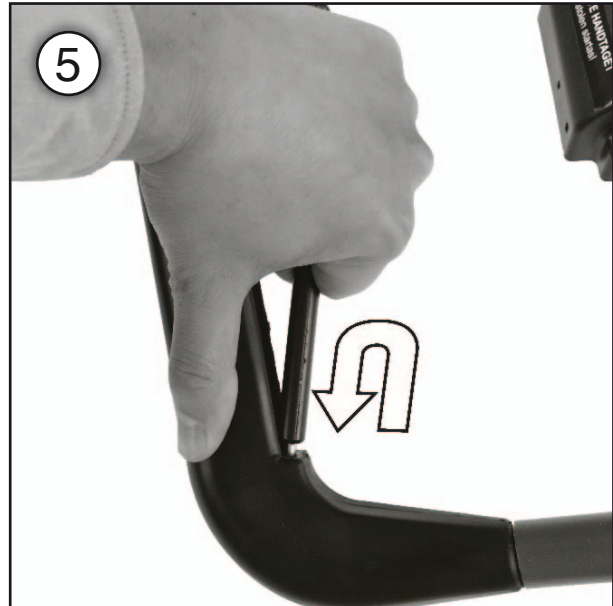


Bild 6. Motsatt ände av säkerhetsgreppet riktas in med kraft i gummihandtagets motsatta hållighet.



Bild 4. Med ändarna på plats ska du trycka tillbaka säkerhetsgreppet i hållaren.