


## BROMS S3 FRAMFLYTTAD/ BAKÅTFLYTTAD

Klicka på bilden för större format

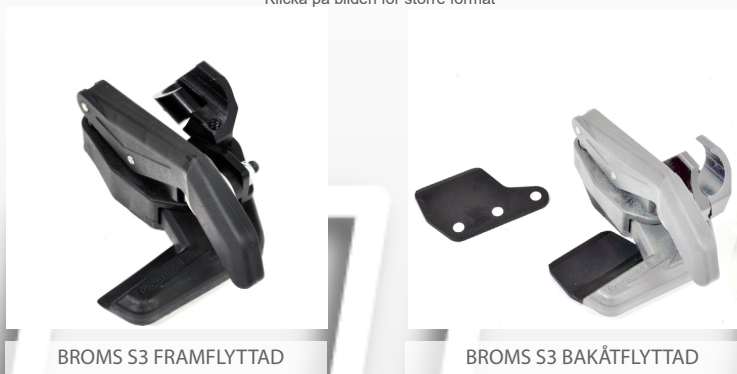

### NU KAN VI ERBJUDA BROMS S3 SOM FRAMFLYTTAD RESP. BAKÅTFLYTTAD

Vid vissa kombinationer av drivhjulstorlekar och bakaxelinställningar kan det uppstå ett behov av att ha broms S3 monterad längre fram resp. längre bak för att få en tillfredställande bromsverkan. [Se ytterligare info om inställningar](#) (pdf)

T.ex. vid val av stora drivhjul och långt framflyttad bakaxel blir **Broms S3 Framflyttad** ett lämpligt alternativ. Den har en utformning av fästet vilket gör att den kan monteras längre fram än Broms S3.

Monteringen av **Broms S3 Framflyttad** är den samma som för den vanliga Broms S3. [Monteringsanvisning](#) (pdf)

Vid andra kombinationer, av mindre drivhjul och långt bakåtflyttad bakaxel, så är behovet det omvända. S3 bromsen behöver flyttas bakåt. För att då uppnå full bromsverkan kan vi nu erbjuda **Broms S3 Bakåtflyttad**, där ett extra bromsblad monteras på befintlig broms. Det större bromsbladet gör att bromsen når längre bak än Broms S3 utan monterat bromsblad.

[Se ytterligare info om inställningar](#) (pdf)

Monteringen av **Broms S3 Bakåtflyttad** är den samma som för PU bromsbladet. [Monteringsanvisning](#) (pdf)

Om en rullstol beställs i en konfiguration där någon av ovanstående bromsalternativ blir aktuell monterar Panthera dessa utan extra kostnad.

#### Broms S3 Framflyttad

Art.nr.	Benämning
4630010	Broms S3 framflyttad kpl, par
4630011	Broms S3 framflyttad, vänster
4630012	Broms S3 framflyttad, höger

#### Broms S3 Bakåtflyttad

4630120	Bromsblad Kit S3 broms BF, par
4630123	Bromsblad BF Broms S3, vänster
4630124	Bromsblad BF Broms S3. höger